

# seca robusta 813

L'art de prendre  
les choses à la légère.



- Châssis massif à renforcement d'acier – Pour les personnes jusqu'à 200 kilos.
- Pieds en caoutchouc antidérapants – Pour un positionnement stable.
- Grande unité d'affichage LCD – Pour une lecture facile du poids.
- Fonction Step-Off – Pour se peser sans devoir allumer d'abord la balance.
- Plus de 165 ans d'expérience – Pour une précision maximale.
- Une balance du leader mondial de la pesée et de la mesure médicales.

**seca**

La précision au service de la santé

## seca robusta 813 :

Elle fait preuve de grandeur malgré sa compacité.

Voiez la largeur de ce plateau dont le dimensionnement a été choisi pour que les personnes les plus corpulentes puissent se peser en toute sécurité. Et aussi en toute commodité, malgré leur poids.



### Elle fait preuve d'élégance malgré sa solidité.

De plus en plus de personnes ont des problèmes considérables de poids. C'est spécialement pour elles que ce pèse-personne a été mis au point : son cadre d'acier massif supporte des charges de 200 kilos et est conçu pour résister à de telles contraintes pendant de nombreuses années. Grâce à sa construction extrêmement plate, cette balance est également aisément accessible. Un avantage non négligeable pour tous ceux qui ont des difficultés à se déplacer du fait de leur corpulence.



### Elle fait preuve de souplesse malgré sa robustesse.

Plutôt que de doter le plateau d'un simple revêtement de caoutchouc, nous avons opté pour un matériau spécial à deux composants aussi doux au toucher que le caoutchouc, mais néanmoins d'une robustesse remarquable. Ainsi, la surface du plateau n'est pas seulement agréable au contact, mais également facile à nettoyer car ce matériau résiste à tous les détergents et désinfectants courants.

### Elle fait preuve de finesse malgré sa simplicité.

Le poids et la corpulence ne posent pas de problèmes à la seca robusta 813. Grâce à la fonction Step-Off unique en son genre, on n'a même pas besoin de se baisser pour l'allumer. Si de nombreuses balances sont dotées d'un module d'affichage trop petit, seca fait exception à la règle : les chiffres LCD de 29 millimètres de haut facilitent grandement la lecture du poids. Comme toute balance seca, celle-ci contribue à une meilleure qualité de vie car nous attachons de l'importance au moindre détail.

Matériau spécial  
2 composants de  
qualité supérieure,  
aussi doux que le  
caoutchouc.

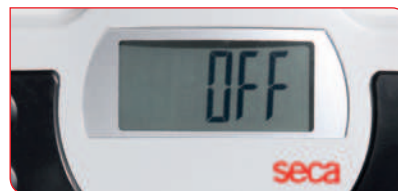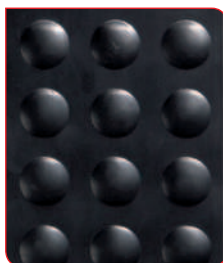

Grands chiffres LCD pour une lecture facile du poids.

## seca robusta 813

### Caractéristiques techniques

- Capacité : 200 kg / 440 lbs / 31 sts
- Graduation : 100 g / 0,2 lbs
- Dimensions (LxHxP) : 433 x 47 x 373 mm
- Poids : 2,6 kg
- Fonctions : Step-Off, Auto-HOLD, extinction automatique.
- Fournis avec chaque balance : 4 piles de type AAA, 4 pieds de nivellement pour les sols recouverts de moquette

**REALME**  
matériel médical  
Tel 03 22 72 55 24  
Fax 03 22 72 17 35  
contact@realme.fr  
1 rue des violettes 80 480 SALEUX